



**QUASAR**<sup>®</sup>  
D E N T A L   E Q U I P M E N T

Linea Odontoiatri





# QUASAR<sup>®</sup>

D E N T A L   E Q U I P M E N T

# Frese gommamate lucidanti QDE

## QDE polishers

### Linea Odontoiatri

100% MADE IN ITALY



Novità 2011

Perno in ottone zigrinato  
per aumentare  
l'ancoraggio della mescola

Mescola di qualità superiore:  
+ elastica  
+ resistente  
+ sicura  
+ duratura  
sterilizzabile fino a  
120°/140°C

**Consigliata**  
dai migliori dentisti

**Nuova mescola**  
Miglior risultato,  
maggiore durata

**Più sicurezza**  
Qualità italiana  
garantita al 100%

CE



	Granulato Grosso Coarse grain Rosso Red	Granulato Medio Medium grain Verde Green	Granulato Fine Fine grain Giallo Yellow	Gran. Extrafine Extra-fine grain Grigio perla Griseous
<b>Micro Fiamma</b>				
	<b>QR067</b> 	<b>QR068</b> 	<b>QR069</b> 	<b>QR070</b> 



**BRAND NEW!  
NOVITA' 2011**

La nostra gamma è stata impreziosita dalla nascita delle nuove frese gommatae diamantate Quasar Dental Equipment. Le frese diamantate mantengono le caratteristiche di durata tipiche del nostro marchio e in più sono universali e prodotte con vera polvere di diamante al 100%

Garantiamo un risultato stupefacente ad un prezzo concorrenziale. Provale subito!

Our range of products has been made precious by the brand-new diamond polisher. The Quasar Dental Equipment diamond polishers maintain the same lifetime characteristics typical of our brand. Moreover, they are universal and produced with real diamond powder at 100%. Try them now!



Ogni fresa gommata è ordinabile in KIT MONO da 4 pcs. o nel KIT "Diamond" da 4 pcs. (1 pcs. cad.)



**Le frese gommatae lucidanti Quasar servono per la lucidatura di oro, amalgama, compositi, ceramica, resine e zirconio.**

La gamma di articoli è completa ed è così composta:

- frese gommatae a grana grossa per un primo passaggio di sgrossatura
- frese gommatae a grana media per rifinitura
- frese gommatae a grana fine per finitura e lucidatura
- frese gommatae a grana extra-fine per lucidatura a specchio.

L'utilizzo di tutte le sequenze sopra elencate permette il raggiungimento del massimo risultato e preserva nel tempo la durata delle frese stesse.

Il risultato ottenuto fa sì che le superfici lucidate non necessitano di ulteriori trattamenti di finitura.

A seconda della lucidabilità di un composito, se ottenuta da una buona finitura precedentemente effettuata con l'ausilio di una fresa da rifinitura in carburo di tungsteno, è possibile rinunciare a una più fasi di lucidatura.
















**Quasar Dental Equipment rubber polishers are used to shine gold, amalgam, composite, resin, zirconium, ceramic.**

Our range of products is complete for every demand and it's so composed:

- coarse grain rubber polishers used for the first roughing passage
- medium grain rubber polishers used for finishing
- fine grain rubber polishers used for finishing and polishing
- extra-fine grain rubber polishers used for bright glazing.

Using all the four passage above suggested permits to reach the best result and preserves the life of the item.

The obtained result permits not to do any other finishing treatment.

	Granulato Medio Medium grain Rosso Red	Granulato Fine Fine grain Verde Green
<b>Fiamma</b> 	<b>QR021</b> 	<b>QR022</b> 
<b>Macro Fiamma</b> 	<b>QR011</b> 	<b>QR012</b> 
<b>Micro Fiamma</b> 	<b>QR051</b> 	<b>QR052</b> 
<b>Campana</b> 	<b>QR041</b> 	<b>QR042</b> 
<b>Disco</b> 	<b>QR031</b> 	<b>QR032</b> 



Ogni fresa gommata è ordinabile in KIT MONO da 10 / 20 pcs. o nel KIT "Gold & Amalgam" da 10 pcs. (1 pcs. cad.)















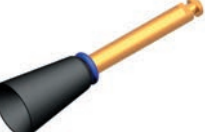







Le frese gommata lucidanti Quasar sono in grado di adattarsi con facilità all'anatomia individuale del dente.

Con le nostre frese gommata lucidanti di ultima generazione è possibile ottenere una lucidatura a specchio perfetta.

Il risultato che ne consegue è una lucidatura impeccabile con tempi di esecuzione rapidi.

Quasar Dental Equipment rubber polishers are able to easily adapt themselves to the individual anatomy of the tooth to cure.

With our last generation rubber polishers it is possible to obtain a perfect glazing with a quick execution time.

	Granulato Grosso Coarse grain Bianco White	Granulato Medio Medium grain Blu Blue	Granulato Fine Fine grain Giallo Yellow	Gran. Extrafine Extra-fine grain Rosso Red
<b>Fiamma</b> 	 QR027	 QR028	 QR029	 QR030
<b>Micro Fiamma</b> 	 QR057	 QR058	 QR059	 QR060
<b>Campana</b> 	 QR047	 QR048	 QR049	 QR050
<b>Disco</b> 	 QR037	 QR038	 QR039	 QR040



Ogni fresa gommata è ordinabile in KIT MONO da 10 / 20 pcs. o nel KIT "Ceramic" da 16 pcs. (1 pcs. cad.)

**Utilizzo**

Per evitare la formazione di eccessivo calore e per una lucidatura a specchio ottimale procedere unitamente a raffreddamento con acqua (min. 50 ml/min.). In questo modo il gommino di lucidatura risulterà ancora più efficace, poiché le particelle fini di composito, ceramica, oro, amalgama o resina rimosse in fase di lucidatura vengono asportate con l'ausilio all'acqua di raffreddamento.

Al fine di raffreddare in modo mirato con acqua la zona da trattare e per evitare l'eccessiva formazione di spruzzi in direzione del motore, si consiglia di procedere con il raffreddamento esterno puntato tra strumento e superficie da trattare.

**Employment**

Use water spray. Sterilize in autoclave max 120°C for Gold - Amalgam / max 140°C for Ceramic, Composite, Resin and Diamond.

	Granulato Grosso Coarse grain Bianco White	Granulato Medio Medium grain Blu Blue	Granulato Fine Fine grain Giallo Yellow	Gran. Extrafine Extra-fine grain Rosso Red
<b>Fiamma</b> 	 QR023	 QR024	 QR025	 QR026
<b>Micro Fiamma</b> 	 QR053	 QR054	 QR055	 QR056
<b>Campana</b> 	 QR043	 QR044	 QR045	 QR046
<b>Disco</b> 	 QR033	 QR034	 QR035	 QR036



Ogni fresa gommata è ordinabile in KIT MONO da 10 / 20 pcs. o nel KIT "Composite" da 16 pcs. (1 pcs. cad.)



**Per un miglior risultato il numero di giri consigliato è il seguente:**

- Frese gommata per sgrossatura e rifinitura (primo e secondo passaggio) 10.000 giri / min.
- Frese gommata per finitura e lucidatura a specchio (terzo e quarto passaggio) 6.000 ÷ 8.000 giri / min.

**Sicurezza:** Non ingerire, tenere fuori della portata dei bambini.

**Sterilizzazione:** Prima dell'uso, le frese gommata lucidanti Quasar, devono essere sottoposte a sterilizzazione in autoclave alle seguenti temperature:

- Frese per oro e amalgama: fino a 120°C
- Frese per ceramica: fino a 140°C
- Frese per composito e resine: fino a 140°C

**For a better result the suggested number of rev. per minute is the following:**

- First and second passage: 10.000 rev. per minute
- Third and fourth passage: 6.000/8.000 rev. per minute

**Security:** do not eat, keep out of children reach.

**Sterilization:**

- Gold and amalgam polishers: sterilize in autoclave max 120°C
- Ceramic, diamond, resins, composite: sterilize in autoclave max 140°C



www.quasardental.com  
info@quasardental.com

**QUASAR**<sup>®</sup>  
D E N T A L   E Q U I P M E N T

Distribuito da:

